

OVERLINE
élite

luce e vitalità al viso
bright and pretty skin



RESOLUTION FACE

OVER1115

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CUSTOMIZED RESOLUTIONS



Check-up

Controllo idratazione *Hydration check-up*

Pulizia cutanea *Skin cleansing*

Scrub Brushes *Scrub Brushes*

Ultrasound 25KHz *Ultrasound 25KHz*

Corrente galvanica *Galvanic current*

Micro Dermoabrasione *Microdermabrasion*

Programmi Ringiovanimento *Rejuvenation programs*

Radio Frequenza *Radio Frequency*

Elettroporazione *Electroporation*

Funzione Lifting *Lifting function*

Trattamento Stimol "Stimol" *Treatment*

Ultrasound 25KHz *Ultrasound 25KHz*

Massaggio Endodermico *Endodermic Massage*

Programmi Benessere *Wellness programs*

Massaggio Endodermico *Endodermic Massage*

Mask Light Face

Radio Frequenza *Radio Frequency*

• **Pelle Secca** *Dry skin*

• **Pelle Grassa** *Oily skin*

• **Pelle Mista** *Combination skin*

• **Acne** *Acne*

• **Rughe** *Wrinkles*

• **Rossore** *Redness*

• **Macchie Cutanee** *Spots*

• **Rilassamento dei tessuti** *Sagging skin*

COCCOLE PER IL VISO

CUDDLES ON FACE

élite Resolution Face è il sistema pensato per prendersi cura degli inestetismi di viso, collo e décolleté, un'apparecchiatura che racchiude le tecnologie più innovative per trattamenti di pulizia, ossigenazione, tonificazione e rigenerazione. Con **élite Resolution Face** è possibile scegliere tra due distinti sistemi di lavoro partendo dall'imperfezione per arrivare alla soluzione:

- **il trattamento guidato**, in cui l'estetista individua l'inestetismo e l'apparecchiatura la accompagna in ogni fase, dall'analisi agli step del trattamento, indicando le tecnologie più adatte;
- **il trattamento manuale**, attraverso il quale, dopo aver determinato la tipologia dell'inestetismo, l'estetista provvede autonomamente alla scelta del trattamento, potendo all'occorrenza contare sulla visualizzazione delle caratteristiche delle imperfezioni e delle soluzioni proposte.

élite Resolution Face takes care of face, neck and décolleté blemishes. It's a device that encompasses the most advanced technologies for cleansing, oxygenating, toning and regenerating treatments. This device permits two distinct working methods to solve the detected imperfection:

- **Guided treatment:** *the beautician identifies the imperfection and so the device accompanies her at all stages, from the starting analysis through every step of the treatment, indicating the most suitable technology.*
- **Manual treatment:** *the beautician herself selects the type of the imperfection and chooses personally the treatment. If necessary, she can always count on the device, that displays the characteristics of each imperfection and proposes the solutions.*

PROGRAMMI BENESSERE

Wellness programs

Massaggio Endodermico Endodermic Massage

E' piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma consente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per l'estetista.

This treatment is pleasant and effective like a manual massage, but it also permits to treat the face more equally and it is less tiring for the beautician.



Mask Light Face Mask Light Face (OPTIONAL)

La Cromo Frequenza considera l'inestetismo una vibrazione disarmonica delle cellule della pelle, che può essere riequilibrata sfruttando l'energia e quindi la vibrazione di uno o più colori specifici. La Mask, in abbinamento alle speciali maschere in alginato, consente di riportare l'epidermide al suo corretto equilibrio cellulare. Integrata con altri trattamenti estetici ne potenzia il risultato finale.

The Chromo Frequency considers the skin imperfections as a disharmonious vibration of cells, which can be leaded to their correct balance using the energy of the colors. The Mask Light Face and the specific alginate masks can bring back the skin to its correct balance. The Chromo Frequency increases the final results of the other aesthetic treatments.



CHECK-UP

Controllo idratazione *Moisture check-up*

Sul monitor appare l'immagine di un viso sul quale sono indicati i punti ove posizionare il manipolo per la rilevazione del valore medio dell'idratazione.

The monitor shows the image of a face with the points where to put the handpiece for the value detection of skin hydration.



PULIZIA CUTANEA

Skin cleansing

Scrub Brushes *Scrub Brushes*

Tra i trattamenti di pulizia uno dei più importanti è il Brush, un'azione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di spazzole.

One of the most important cleansing treatment is the "Brush", a gentle mechanical action performed by different types of brushes.



Ultrasound 25KHz *Ultrasound 25KHz*

Effettua sessioni di trattamento di pulizia profonda, di pulizia superficiale per le macchie e di veicolazione dei principi attivi. 14 programmi

Treatments: surface and deep cleansing - anti-spots - conveyance of active ingredients. 14 programs



Corrente galvanica *Galvanic current*

È utilizzata per ottenere sia un'azione di desincrostazione cutanea sia un'azione di ionoforesi. Due Programmi: Desincrostante, Ionoforesi.


It is used to obtain a skin descaling action and also a iontophoresis action. Two programs: Descaling, Iontophoresis.



Micro Dermoabrasione *Microdermabrasion*

Permette l'esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, facilitando un maggiore assorbimento dei prodotti cosmetici utilizzati.

This treatment allows the exfoliation of the skin layers, encouraging the cell renewal of the treated tissue. It increases also the skin permeability, supporting the absorption of the used cosmetics.

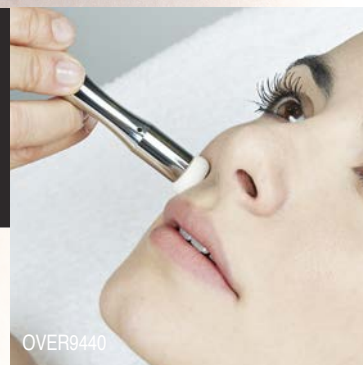

PROGRAMMI RINGIOVANIMENTO

Rejuvenation programs

Radio Frequenza **Radio Frequency**

Tramite l'onda diatermica permette di riportare a un adeguato sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico e incrementare la loro azione.

The diathermic wave allows to restore a proper vascularization system in all the treated areas. The Diathermy also stimulates some natural processes, such as the production of collagen, elastin and hyaluronic acid, increasing their action.



Elettroporazione **Electroporation**

L'Elettroporazione, attraverso l'emissione di impulsi elettrici, contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all'inetetismo da trattare.

Through the emission of electrical impulses, the Electroporation contributes to open channels in the dermis to convey in depth any substance applied, chosen according to the imperfections to be treated.



Funzione Lifting **Lifting function**

Permette la stimolazione (elettro-lifting) del microcircolo cutaneo, favorendo il nutrimento, l'ossigenazione e la rivitalizzazione dei tessuti.

It allows the (electro-lifting) stimulation of the cutaneous microcirculation, by promoting nutrition, oxygenation and regeneration of the tissues.



Trattamento Stimol **"Stimol" Treatment**

L'Elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo selettivo i muscoli atoni.

The bipolar Electrostimulation tones up the unstressed muscles gently and selectively.



(OPTIONAL)

Vaporizzatore *Steamer*



RF Multipolare *Multipolar RF*



HF Alta Frequenza *HF High Frequency*



iSol.
RESOLUTIONFACE

LA COSMETICA AL PASSO CON LA TECNOLOGIA

Cosmetics keeping up
with technology

ISO.FOAM.150
150ml
**CLEANSING
SOFT
MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200
250ml
**JOJOBA
FACE &
BODY SCRUB**
Scrub in gel ai
microgranuli di
Jojoba

ISO.DER.100 - 200ml
**PURE
TOUCH**
Pre Micro
Dermoabrasione

ISO.DER.200 - 200ml
RELIEF
Post Micro
Dermoabrasione

ISO.POR.600 - 150ml
**RESOLUTION
PURE
REBALANCE**
Siero Riequilibrante
a Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.POR.650 - 150ml
**RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER**
Siero Anti-Age a
Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.CHROME.100
250ml
**AGE LIFT
PINK MASK**
Maschera gel
Anti-Age (Rosa)

ISO.CHROME.200
250ml
**HYDRA
SENSITIVE
BLUE MASK**
maschera gel
idratante/pelle
sensibili (Blue)

ISO.CHROME.300
250ml
**PURE
REBALANCE
ORANGE
MASK**
Maschera gel pelli
impure (Arancione)

ISO.RF.100 - 250ml
**R.F. & STIM
FACE
EMULSION**
Emulsione Anti-Age
trattamento Radio
Frequenza e Stimol

ISO.CRYSTAL.100
250ml
**AGE LIFT
CRYSTAL**
Crema intensiva Anti-
Age ai Liposomi

ISO.CRYSTAL.200
250ml
**HYDRA
SENSITIVE
CRYSTAL**
Crema idratante pelli
sensibili

ISO.CRYSTAL.300
250ml
**PURE
REBALANCE
CRYSTAL**
Crema riequilibrante
detossinante

ISO.SERUM.100
-250ml
**HYDRA LIFT
SERUM**
Siero Anti-Age,
Idratante specifico
viso per jono/
Ultrasuoni

**ISO.SERUM.200 -
250ml**
**LIGHTENING
SERUM**
Siero illuminante,
schiarente specifico
per jono/Ultrasuoni

ISO.SERUM.300
250ml
**PURE
REBALANCE
SERUM**
Siero riequilibrante/
purificante specifico
per jono/Ultrasuoni

OVERLINE | MADE IN ITALY CE

www.overline.it



I prodotti OVERLINE sono conformi alla
norma ISO 13485:2003 Progettazione,
sviluppo, ricerca e commercializzazione
biomedicali di elettroestetica per la cosmetica
ed elettromedicali. Certificato n° 390354



Tutti i prodotti OVERLINE rispettano il sistema
di gestione EN ISO 9001:2008 progettazione,
produzione, vendita, sviluppo e ricerca di stru-
mentazioni biomedicali, di elettroestetica e per
la cosmetica.

Registrazione del certificato TIC 15 100 96408