

élite Resolution New

Fractional RF

il nuovo
lifting

viso corpo

Per una pelle più compatta e omogenea



- **Frazionata** Rughe
- **Frazionata** Smagliature
- **Bipolare**, Viso & Corpo
- **Multipolare**, Viso & Corpo

OVERLINE
ITALIA

OVER3186



RFSMART

1. Il nuovo manipolo intelligente **RFSMART**, messo a punto dai laboratori di ricerca **Overline**, aiuta l'operatrice estetica a effettuare il trattamento di **Radio Frequenza**.
2. La sua caratteristica principale è quella di rilevare la temperatura della zona trattata, indicandola sul proprio display e garantendo il rispetto delle normative emanate dal Ministero della Sanità, con il decreto legge n. 206 entrato in vigore a Gennaio 2016, relative all'innalzamento delle temperature durante i trattamenti di **Radio Frequenza**.
3. I LED integrati al Manipolo consentono di effettuare in sinergia un trattamento di **Cromo Benessere** che consiste nell'irradiare le zone del corpo con la vibrazione di differenti luci colorate, per ottenere un vantaggio estetico.
4. **RFSMART** ha la capacità di bloccare l'erogazione dell'energia attraverso un sofisticato sensore, nel caso in cui l'operatrice dovesse interrompere il movimento del manipolo.
5. Grazie all'evoluto software con il quale è stata implementata l'apparecchiatura, il manipolo **RFSMART** riconosce il trattamento selezionato e si illumina, rendendo immediata la visualizzazione del manipolo da utilizzare.
6. L'indicatore di tempo sul display segnala all'operatore le tempistiche di esecuzione dell'area trattata.



1. Manipolo intelligente ed ergonomico per trattamenti di Radio Frequenza
2. Rilevatore di temperatura sulla zona trattata
3. Led Integrati per il Cromo Benessere
4. Sensore di movimento che guida al corretto utilizzo
5. Indicatore del tempo di esecuzione
6. Segnalatore luminoso per indicare il manipolo da utilizzare

RF BIPOLARE MULTIPOLARE E FRAZIONATA

RF Multisystem



élite Resolution New Fractional RF è la nuova tecnologia in grado di unire le 3 tipologie più efficaci della Radiofrequenza viso e corpo: Radiofrequenza Bipolare, Radiofrequenza Multipolare e Radiofrequenza Frazionata.

Tali metodiche di lavoro permettono l'utilizzo della tecnologia con grande versatilità, consentendo sia trattamenti viso, per un immediato ringiovanimento e distensione cutanea, sia trattamenti corpo, per una visibile riduzione degli inestetismi causati dalla cellulite. Il risultato è stabile e di lunga durata nelle zone a minore spessore cutaneo quali guance, fronte e décolleté, mentre nelle parti più voluminose come fianchi, gambe e braccia sono consigliati un maggior numero di trattamenti.

L'integrazione e l'ausilio dell'innovativa Radio Frequenza Frazionata permette di effettuare trattamenti viso, collo e décolleté anche su inestetismi di maggior consistenza.



**TOUCH
SCREEN
10" LCD
DISPLAY**

**CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI**



mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465




Listino PAG. 02



RUGHE

SMAGLIATURE

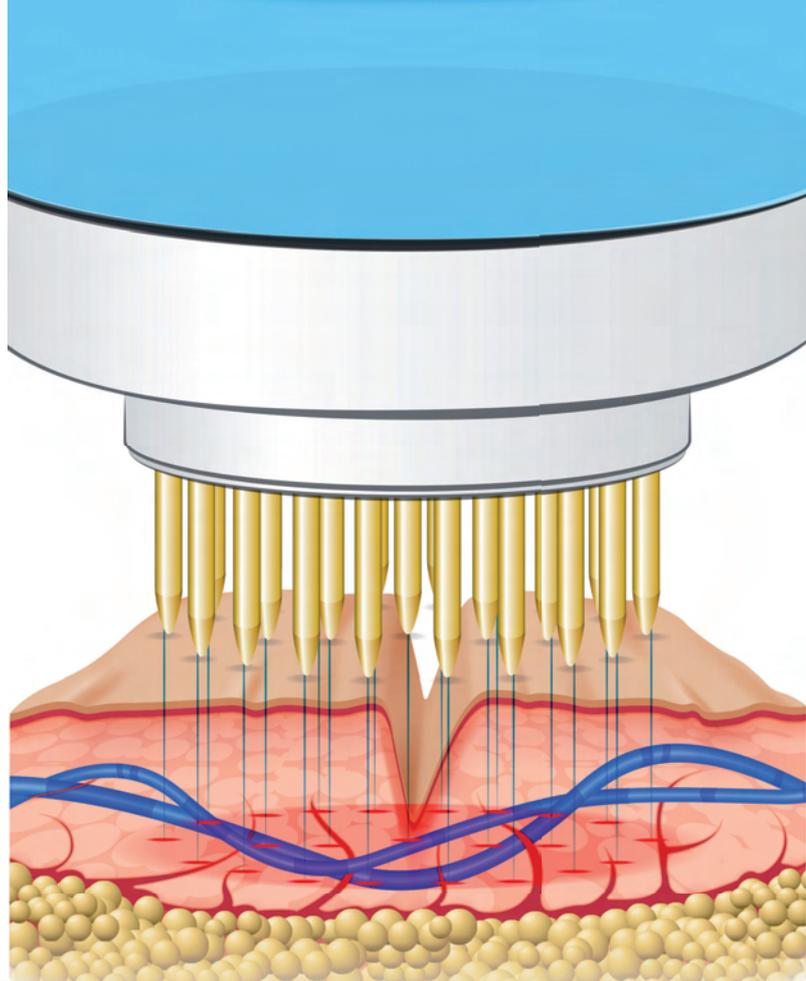

RF FRAZIONATA

Azione Profonda

La RFF permette l'aumento omogeneo della temperatura a livello del derma, determinando un'azione termica a carico delle fibre collagene e permette di riequilibrare le fibre sia superficiali che profonde, riorganizzando le linee di tensione cutanea in modo fisiologico.

Tali azioni si traducono nella neo-sintesi di collagene con aumento progressivo della densità termica.

La RFF è un sistema di Radio Frequenza in grado di unire la termostimolazione resistiva per il rimodellamento plastico del derma alla correzione delle irregolarità della texture, determinando così un ringiovanimento della cute a tutto spessore.



RF FRAZIONATA RUGHE

Il manipo ad effetto circolare studiato dai laboratori Overline, permette di concentrare l'azione della Radio Frequenza Frazionata, ottenendo ottimi risultati sulle rughe, già dalle prime sedute.



RF FRAZIONATA SMAGLIATURE

L'applicatore specifico crea un'azione mirata, concentrando l'azione direttamente sulla smagliatura, per la ricostruzione delle fibre tessutali del derma.



OVER9033VISO-F : Manipolo Frazionato RF Viso 12 poli (color)



OVER9033VISO-F : Manipolo Frazionato RF Viso 12 poli (color)




RF CORPO MULTIPOLARE

Azione Rimodellante

La RF multipolare sfrutta le caratteristiche di entrambe le metodiche monopolare e bipolare per portare l'energia sotto la cute, e in più ha il vantaggio di focalizzare il raggio di azione in un unico punto attraverso il sistema dei 4 poli. In questo modo si possono ottenere temperature più elevate sia in superficie che negli strati più profondi. Il manipolo multipolare permette inoltre di operare a potenze più basse e quindi con tempi di trattamento relativamente più lunghi senza creare fastidi e/o dolori al cliente.



OVER9033CORPO-2 : Manipolo SMART RF Corpo Multipolare (color)

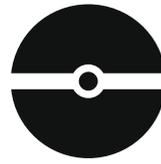

RF CORPO BIPOLARE

Azione Elasticizzante

L'effetto bio-fisico della Radio Frequenza si basa sulla trasformazione dell'energia in calore. Aumenta il metabolismo locale, velocizza il flusso sanguigno nel microcircolo, elimina il ristagno di liquidi nei capillari, libera il tessuto interstiziale dall'ingorgo edematoso, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi, interrompe la reazione fibrotica del sottocute, riduce il rilassamento cutaneo e gli effetti degli inestetismi della cellulite.



OVER9033CORPO-1 : Manipolo SMART RF Corpo Bipolare (color)



RF VISO MULTIPOLARE

Azione Anti-Age

Questo trattamento si utilizza per ottenere il ringiovanimento cutaneo. Agisce attraverso l'aumento della temperatura sottocutanea che causa la denaturazione delle proteine del Collagene, dando luogo a una riorganizzazione delle linee di tensione cutanea. Inoltre, attiva i fibroblasti che, a seguito dell'insulto termico, incrementano nel tempo la produzione di Collagene ed Elastina con conseguente aumento della consistenza del derma, per un significativo effetto lifting.



cod. 9034VISO-6 manipolo RF



RF VISO BIPOLARE

Azione Rigenerante

Questo trattamento dallo straordinario effetto liftante, contrasta il rilassamento cutaneo. Innalzando la temperatura del tessuto connettivo esistente e attivando, attraverso il calore, i fibroblasti a produrre nuovo Collagene e nuova Elastina, permette di attenuare le rughe e i segni dell'invecchiamento, ringiovanendo il viso, per un effetto di compattamento e distensione dei tessuti del tutto naturale. Significativi risultati, visibili dopo qualche mese.



cod. 9034VISO-4 manipolo RF



Esalta i benefici dei trattamenti Overline



RFF EXTREME

Emulsione Anti-Age Pre RF Frazionata
ISO.RFF.110 - Airless 150ml
(Cabina)



RF FRAZIONATA ACTIVATOR

Siero Anti-Age Post RF Frazionata
ISO.RFF.120R - 10 Strip da 3ml
(Cabina & Mantenimento)



RF & STIM FACE EMULSION

Emulsione Corpo per RF e Stimol
ISO.RF.100 - 250ml
(Cabina)



RF BODY EMULSION

Emulsione Corpo per RF
ISO.RF.500 - 500ml
(Cabina)



AGE LIFT CRYSTAL

Crema intensiva Anti-Age ai Liposomi
ISO.CRYSTAL.100 Airless 50ml
(Mantenimento)



CLEANSING SOFT MOUSSE

detergente Dermocompatibile
Viso & Corpo
ISO.FOAM.150 - 150ml
(Cabina & Mantenimento)



HYDRABODY CELL

Emulsione Corpo Cellulite
ISO.BODY.100 Airless 200ml
(Mantenimento)



HYDRABODY FIT

Emulsione Corpo Effetto Tonicante
ISO.BODY.200 Airless 200ml
(Mantenimento)



JOJOBA FACE & BODY SCRUB

Scrub in Gel ai Microgranuli di Jojoba
ISO.SCRUB.200 - 250ml
(Cabina)

Overline è un marchio **Technology S.r.l.**, azienda che ha ottenuto 3 importanti certificazioni internazionali **TÜV Rheinland**. Queste certificazioni attestano che la filiera produttiva rispetta le normative e gli standard internazionali imposti per la produzione di apparecchiature biomedicali, di elettroestetica e per la cosmetica, sottolineando quanto l'eccellenza dei prodotti Overline sia un vantaggio competitivo per il lavoro dell'estetista e per la soddisfazione e la tranquillità del cliente finale.



MADE IN ITALY



Occupational Health and Safety Assessment Series
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082302



Quality Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105082302



Design, manufacture and service of electromedical devices
EN ISO 13485:2012

www.tuv.com
ID 9105082302

Overline si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparecchiatura descritta in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le apparecchiature **Overline** sono progettate e programmate, per avere risultati sugli inestetismi senza oltrepassare il limite estetico consentito.

